


Infusionssets

Spezielle Infusionssets zur t:slim X2 Insulinpumpe sichern eine optimale Therapie.

Unterschiedliches Kanülenmaterial, Größen, Längen, Einführwinkel und -hilfen decken die verschiedensten Bedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensbereichen ab. Der patentierte t:lock Anschluss optimiert den Befüllvorgang und sorgt für eine sichere Insulinabgabe.

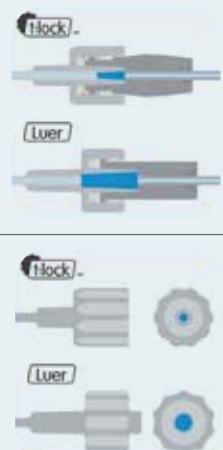

t:lock™ Anschluss

- reduziert die Zeit zum Befüllen des Infusionssets um 30 Sekunden
- senkt den Insulinbedarf zum Befüllen des Infusionssets um 4,4 Einheiten

Infusionssets mit t:lock Anschluss sind nur mit dem t:slim Reservoir mit t:lock Schlauchanschluss kompatibel.

AutoSoft™ 90 Infusionsset

- All-in-one Infusionsset mit 90° Soft-Kanüle
- integrierte automatische Einführhilfe
- Infusionsschlauch an der Kanüle abkoppelbar
- unterschiedliche Kanülen- und Schlauchlängen und in drei verschiedenen Farben
- transparentes Sichtfenster an der Einstichstelle
- großer Griffbereich am Schlauchverbinder für einfaches Lösen



Farbe	Bezeichnung	Kanülenlänge	Schlauchlänge	Füllvolumen Kanüle	Lieferumfang
grau	AutoSoft 90 6 mm/60 cm, grau	6 mm	60 cm	0,3IE	10 St.
	AutoSoft 90 6 mm/110 cm, grau	6 mm	110 cm	0,3IE	10 St.
	AutoSoft 90 9 mm/60 cm, grau	9 mm	60 cm	0,5IE	10 St.
	AutoSoft 90 9 mm/110 cm, grau	9 mm	110 cm	0,5IE	10 St.
blau	AutoSoft 90 6 mm/60 cm, blau	6 mm	60 cm	0,3IE	10 St.
	AutoSoft 90 9 mm/60 cm, blau	9 mm	60 cm	0,5IE	10 St.
pink	AutoSoft 90 6 mm/60 cm, pink	6 mm	60 cm	0,3IE	10 St.
	AutoSoft 90 9 mm/60 cm, pink	9 mm	60 cm	0,5IE	10 St.

AutoSoft™ 30 Infusionsset

- All-in-one Infusionsset mit 30° Soft-Kanüle
- integrierte Einführhilfe
- abkoppelbarer Infusionsschlauch direkt an der Kanüle
- transparentes Sichtfenster an der Einstichstelle
- bevorzugt für Kinder, aktive Personen und schlanke Erwachsene



30° Soft
t:lock



integrierte Einführhilfe

Bezeichnung	Kanülenlänge	Schlauchlänge	Füllvolumen Kanüle	Lieferumfang
AutoSoft 30 13 mm/60 cm	13 mm	60 cm	0,7 IE	10 St.
AutoSoft 30 13 mm/110 cm	13 mm	110 cm	0,7 IE	10 St.

VariSoft™ Infusionsset

- 20-45° Soft-Kanüle ermöglicht es dem Anwender, seinen optimalen Einführwinkel selbst zu wählen
- leicht manuell einzuführen und einfach zu diskonnektieren
- diskret im Tragen durch flaches Profil
- abkoppelbarer Infusionsschlauch direkt an der Kanüle
- verschiedene Kanülen- und Schlauchlängen
- bevorzugt für Kinder, aktive Personen und schlanke Erwachsene



13 mm Kanüle

17 mm Kanüle

20°–45° Soft
t:lock

Bezeichnung	Kanülenlänge	Schlauchlänge	Füllvolumen Kanüle	Lieferumfang
VariSoft 13 mm/60 cm	13 mm	60 cm	0,7 IE	10 St.
VariSoft 13 mm/80 cm	13 mm	80 cm	0,7 IE	10 St.
VariSoft 17 mm/60 cm	17 mm	60 cm	0,7 IE	10 St.
VariSoft 17 mm/110 cm	17 mm	110 cm	0,7 IE	10 St.

TruSteel™ Infusionsset

- feine (29G), 90° Stahlkanüle mit flachem Profil für einfache, schmerzfreie Einführung und hohem Tragekomfort
- zusätzliches Klebepflaster mit Abkopplungseinheit für Infusionsschlauch 10 cm von der Kanüle entfernt für mehr Sicherheit vor möglichem Kanülenverlust
- für Anwender mit Teflonallergie und solche, die eine Stahlnadel bevorzugen



90° Stahl
t:lock

Bezeichnung	Kanülenlänge	Schlauchlänge	Füllvolumen Kanüle	Lieferumfang
TruSteel 6 mm/60 cm	6 mm	60 cm	0,0 IE	10 St.
TruSteel 6 mm/80 cm	6 mm	80 cm	0,0 IE	10 St.
TruSteel 8 mm/60 cm	8 mm	60 cm	0,0 IE	10 St.
TruSteel 8 mm/80 cm	8 mm	80 cm	0,0 IE	10 St.

t:slim X2™ Reservoir

- Spezielles Reservoir für die t:slim X2 Insulinpumpe
- Die Micro-Delivery™ Technologie ermöglicht kleinste Abgabemengen (bis 0,001 E) und verhindert unkontrollierte Insulinabgaben bei Druckveränderungen
- Reservoirvolumen 3 ml oder 300 Einheiten
- Wechsel abhängig vom verwendeten Insulin alle 48 oder 72 Stunden
- Reservoirschlauch mit speziellem t:lock™ Anschluss zur sicheren Verbindung
- Kompatibel mit allen Tandem Infusionssets mit t:lock Anschluss



Bezeichnung

t:slim X2 Reservoir, 3 ml

Lieferumfang

10 St.